

## Almohadillas en polvo VISOCOLOR para determinación fotométrica de cloro libre (0.03 - 6.00 mg/L Cl<sub>2</sub>) Pack x 100 Det REF 936220

Marca Macherey Nagel  
Procedencia Alemania

### Overview

Method	Photometric determination of the chlorine content with DPD
Measuring range	0.03–6.00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Tests	100 / 1000
Shelf life	5 years from production
REF	936220 / 936220.1
Scope of delivery	100 Powder Pillows in PE bag (936220) 1000 Powder Pillows in box (936220.1)



### Beneficios

- Dosificación de reactivos más sencilla que con VISOCOLOR® ECO. No requiere cuchara.
- Larga vida útil de 5 años desde su fabricación.
- Amplio rango de medición: desde 0,03 mg/L hasta 6,00 mg/L de cloro libre.
- La apertura de los sobres de polvo no requiere tijeras ni otras herramientas.
- Toda la información importante (parámetro, lote, caducidad) está impresa en cada sobre.
- Preprogramado para los fotómetros compactos PF-12Plus y PF-3 (versión: Agua Potable, Piscina).
- Listo para usar en fotómetros HACH\*, con métodos HACH\* preprogramados.

### Aplicaciones

- Piscinas
- Tratamiento de agua potable
- Industria química

### Información General

Añadir cloro a piscinas, depósitos y tuberías principales es un procedimiento aprobado para eliminar gérmenes del agua. Con la dosis correcta, se destruyen microorganismos dañinos, se eliminan numerosas impurezas y se previene el crecimiento de algas. Sin embargo, es fundamental controlar periódicamente el contenido de cloro, ya que un exceso de cloro no solo altera el olor y el sabor del agua, sino que también puede ser peligroso.

Se distingue entre cloro libre y cloro ligado (cloroaminas); la suma de ambos se denomina cloro total, que se puede detectar con los sobres de polvo VISOCOLOR® para cloro total (REF 936221 / 936221.1).

### Contact

#### Technical support and customer service

Tel.: +49 24 21 969-332

E-Mail: [csc@mn-net.com](mailto:csc@mn-net.com)

#### For orders (international)

E-Mail: [sales@mn-net.com](mailto:sales@mn-net.com)

\* HACH es una marca registrada de HACH Company, Loveland, Colorado. El producto VISOCOLOR® no está respaldado, patrocinado ni afiliado a HACH Company.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272



E-mail: [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)

Almohadillas en polvo VISOCOLOR para determinación fotométrica de cloro libre (0.03 - 6.00 mg/L Cl<sub>2</sub>)  
Pack x 100 Det REF 936220

Marca Macherey Nagel  
Procedencia Alemania



**Blanco:**

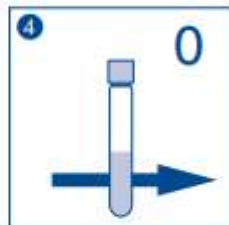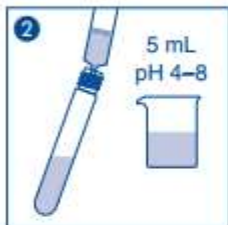

**Muestra:**

